

BLUETENS


Smart elektrostimulátor s příslušenstvím, BL-T02GD

NÁVOD K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že je váš Bluetens vypnutý ve chvíli, kdy přikládáte, nebo sundáváte elektrody.
- Elektrody špatně přilnou, pokud jsou na kůži stopy tělového mléka, krému, oleje apod. Před aplikací kůži očistěte a osušte.
- Připevněte kabel k elektrodám před jejich aplikací na kůži.
- Při umísťování elektrod se držte doporučení v aplikaci. Přitlačte je pevně od středu ke krajům na kůži – celý povrch elektrod musí být v kontaktu s vaší kůží. Přilnavost je optimální ve chvíli, kdy elektrody dosáhnou teploty těla.
- Po použití elektrody umístěte správnou stranou na ochannou fólii a umístěte je do uzavřeného obalu. Zabráníte tak vyschnutí gelové vrstvy. Netahejte za kabel, ale odlepte roh elektrody a pomalu ji sloupněte z kůže. Gelové vrstvy se dotýkejte jen minimálně.
- Elektrody jsou určeny pouze pro 1 pacienta. Počet možných aplikací závisí na stavu vaší pokožky, anatomickém umístění, typu použité terapie a zacházení po použití. Pokud gelová vrstva začne vysychat, můžete ji zvlhčit rovnoměrným rozetřením 1 – 2 kapek čisté vody.
- Sáček s elektrodami skladujte při teplotě 5°C – 27°C mimo sluneční záření.
- Před prvním použitím přístroje si stáhněte aplikaci Bluetens Get Better podle operačního systému vašeho smartphonu na App Store, nebo Google Play. Spárování je automatické a aplikace vás krok za krokem provede nastavením.
- Zvolte si program.
- Umístěte elektrody podle diagramu.
- Spusťte Bluetens. V průběhu programu můžete nastavit jeho intenzitu kolečkem na zařízení.
- Chcete-li ukončit program dříve, než je jeho standardní doba, zmáčkněte tlačítko pro vypnutí na obrazovce vašeho telefonu.

PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE

1. Tlačítko ON / OFF.
2. Otočný regulátor pro nastavení intenzity vám umožní plynule regulovat výkon elektrostimulátoru v rozsahu úrovní označených 1 – 60. Otočením knoflíku doleva na úroveň 1 přejdete na minimum 0.
3. Modré LED ukazatele intenzity zvoleného programu: 1. LED kontrolka se rozsvítí při načtení programu z aplikace, nebo při startu základního, programu (použití bez aplikace); intenzita 0 – 15;
2. LED kontrolka intenzita 16 – 30;
3. LED kontrolka intenzita 31 – 45;
4. LED kontrolka intenzita 46 – 60.

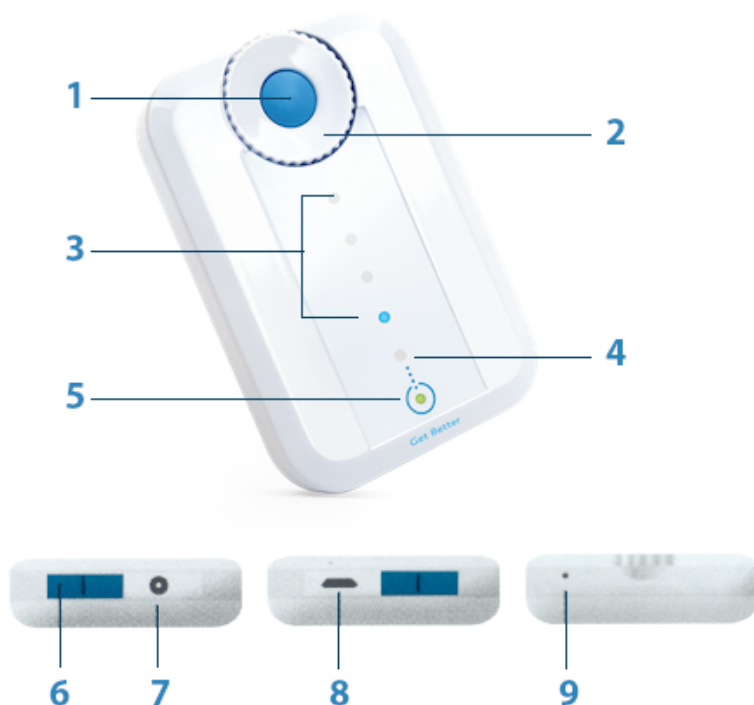

4. Ukazatel stavu nabití baterie začne blikat, pokud kapacita baterie poklesne pod 20 %. Ukazatel svítí v průběhu nabíjení a po plném nabití zhasne.
5. Ukazatel napětí – rozsvítí se při aktivaci tlačítka ON / OFF, dalším stisknutím stejného tlačítka se vypne.
6. Bezpečnostní posuvné tlačítko na spodní části přístroje umožňuje přepínat mezi režimem nabíjení a používání.
7. Port pro připojení kabelu s elektrodami.
8. Port micro USB pro nabíjení.
9. Resetovací tlačítko uvede zařízení do továrního nastavení.



Kontraindikace: Není vhodné pro osoby s kardiostimulátorem, osoby u nichž hrozí riziko epileptického záchvatu, těhotné ženy, osoby s kýlou, srdeční arytmií a srdečními chorobami. Osoby trpící srdeční slabostí by neměly elektrody přikládat v blízkosti srdce.



Upozornění: Nepoužívejte Bluetens ve vodě, nebo vlhkém prostředí (sauna, balneoterapie, hammam, apod.)



Upozornění: Nepřikládejte elektrody na sinokarotickou oblast (přední část krku), na transkraniální oblast (přes hlavu) a transtorakální oblast (přes hrudní koš).



Upozornění: Dodržujte doporučení spojená se správným umístěním elektrod. Návod byly vytvořeny v úzké spolupráci se zdravotníky a odpovídají oblastem těla, na kterých je Bluetens nejefektivnější.



Bluetens lze použít pouze v rámci zamýšlených programů. Bluetens spadá do kategori zdravotních prostředků kategorie IIa. Bluetens je certifikováno TÜV.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nepoužívejte do metrové vzdálenosti od krátkovlnných zdravotních zařízení nebo mikrovlnného vybavení, která mohou ovlivnit proud generovaný elektrostimulátorem Bluetens.
- Používejte pouze kabely Bluetens.
- Během terapie neodpojujte kabely od elektrod. Před odpojením kabelů je nutné zařízení vypnout.
- Nikdy nesundávejte elektrody z těla ve chvíli, kdy je zařízení spuštěné.
- Nikdy nepřipojujte kabely k externímu zdroji energie. Takové zacházení může způsobit elektrický šok.
- Nepoužívejte poškozené kabely.
- K nabíjení zařízení vždy používejte USB kabel Bluetens, který najdete v balení.
- Zařízení a příslušenství Bluetens uchovávejte mimo dosah dětí.
- Chraňte zařízení před pronikáním cizích látek (nečistoty, voda, kov atd.)
- Nepoužívejte Bluetens při řízení.
- Zařízení není dovoleno současně nabíjet a používat. Posuvné tlačítko v tomto případě slouží jako ochranná pojistka.
- V případě jakýchkoliv nejasností týkajících se použití Bluetens v souvislosti s vaší zdravotní kondicí kontaktujte lékaře.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ODPADU A SKLADOVÁNÍ



Po konci životnosti výrobku jej prosím odevzdejte na místě zpětného odběru odpadu.

Doporučení pro skladování a transport

Teplota: 10 – 45 °C

Relativní vlhkost: 25 – 80 %

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Požadavky na zařízení a operační systém: iOS – iPhone 4s nebo novější, iOS 7 nebo novější
- Android: Bluetooth 4.0 kompatibilita a Android 4.3 nebo novější
- Ovládání programů s pomocí smartphonů vybavených Bluetooth 4.0 (BLE)
- Lithium-ion nabíjecí baterie 3,7 V, 400 mAh
- Plynulé ovládání intenzity
- Zdravotnický neinvazivní prostředek spadající do bezpečnostní třídy IIa
- Rozměry zařízení 4 x 6 cm
- Hmotnost 25 g
- Napětí 0 – 70 V (při zatížení 500 Ω)
- Frekvence 1 Hz – 1200 Hz
- Výstupní proud max. 300 mA, průměr 20 mA
- Výstupní napětí max. 100 V (bez zatížení), 65 V (při zatížení)
- USB při nabíjení 5 V, 1000 mA, 5,0 W
- Maximální odpor 1500 Ω
- Forma vlnění: symetrický dvoufázový čtvercový puls
- Zdroj napájení USB – micro USB kabel
- CE certifikace vztahující se na zdravotní zařízení (nařízení 93/42/EEC)
- BF klasifikace přístrojů a jejich příložených částí
- ROHS: zařízení neobsahuje materiály mající škodlivý dopad na životní prostředí
- Ochrana před elektrickým šokem 2. Stupně
- Zařízení určené pro kontakt s lidským tělem mimo srdeční zónu